


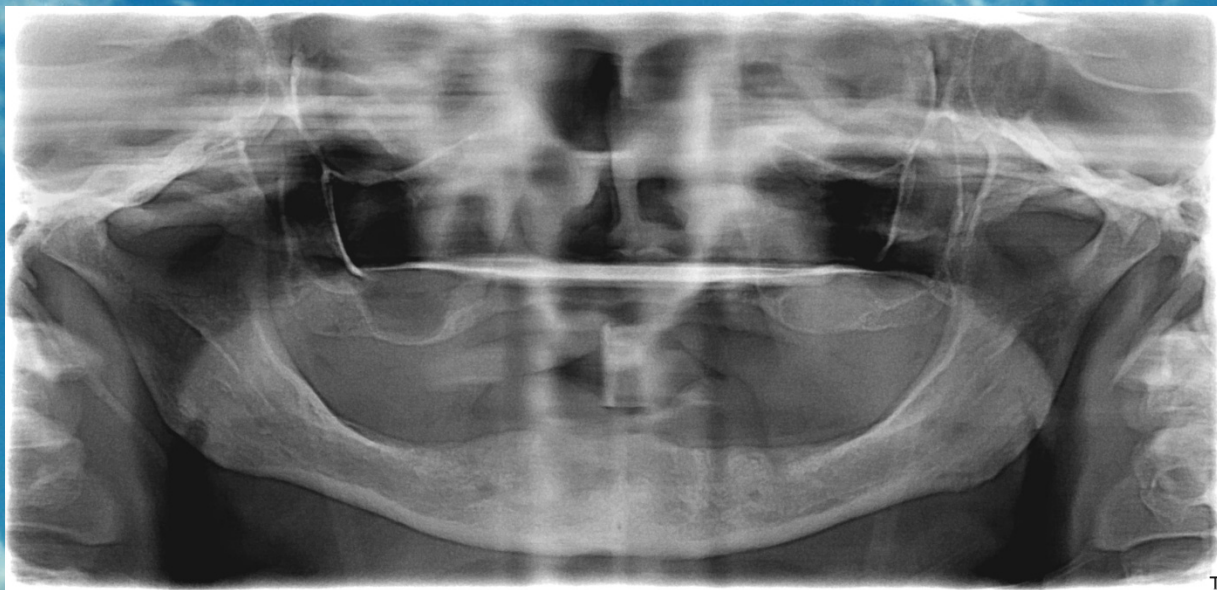

Kilencedik előadás 2019.

A teljes lemezes fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai

Klinikai munkafázisok

- A panaszoktól a prognózig. —————→ •
- Anatómiai lenyomat készítése. —————→ •
- Az egyéni kanál határainak berajzolása. ←———— •
- Az egyéni kanál befunkcionálása. —————→ •
- Funkciós lenyomat készítése. —————→ •
- A központi harapási helyzet meghatározása, arcív regisztráció, a fogak színének és formájának meghatározása. —————→ •
- **A próbafogsorok ellenőrzése, fogpróba.** —————→ •
- Átadás. —————→ •
- Rövid távú visszarendelés
- Hosszú távú visszarendelés.

Laboratóriumi munkafázisok

- Anatómiai minta készítése.
- Egyéni kanál készítése.
- Funkciós minta készítése.
- Harapási sablon készítése.
- A funkciós minták artikulátorba gipszelése. Próbafogsorok elkészítése.
- Készrevitel.

Mit ellenőrzünk fogpróba munkafáziskor?

Először az artikulátorban a mintán, majd a szájbán.

- A mucosalis felszín viszonyát a funkciós mintához, illetve a nyálkahártya-csont alapzathoz.
- A polírozott felszín kialakítását.
- A rágó- illetve a metszőfelszín kialakítását, egymáshoz való viszonyát, az occlusio-articulatio viszonyok ellenőrzését.
- Az esztétikai hatást.
- Az alaplemez viszonyát a funkciós mintához, illetve a nyálkahártya-csont alapzathoz.
- A műíny kialakítását.
- A műfogak egymáshoz való viszonyát, az occlusio-articulatio viszonyok ellenőrzését.
- Az esztétikai hatást.

Bilaterális balansz artikuláció

Munka oldal

Protrusió

Centrális occlusió

Balansz oldal

Esztétikai hatás



Esztétikai hatás




Esztétikai hatás



Christensen jelenségek




Megfelelően befaragott viaszsáncok

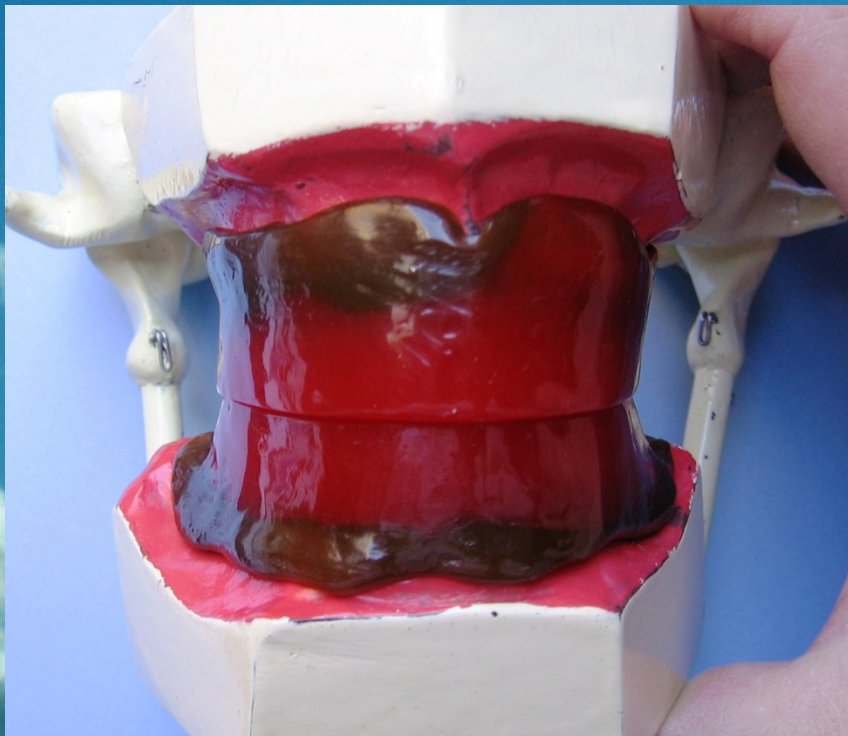


Sagittalis Christensen jelenség

Sagittalis Christensen jelenségnek nevezzük azt, ha a jól befaragott viaszsáncokkal a páciens propulsioba harap a viaszsáncok között molárisok táján hátrafelé nyitott, ék alakú rés keletkezik. Ugyanezt tapasztalhatjuk ép fogazatban szemfog-frontfog vezetés esetén is. A jelenség oka az, hogy a condiláris sík és az occlusios sík szöget zár be.

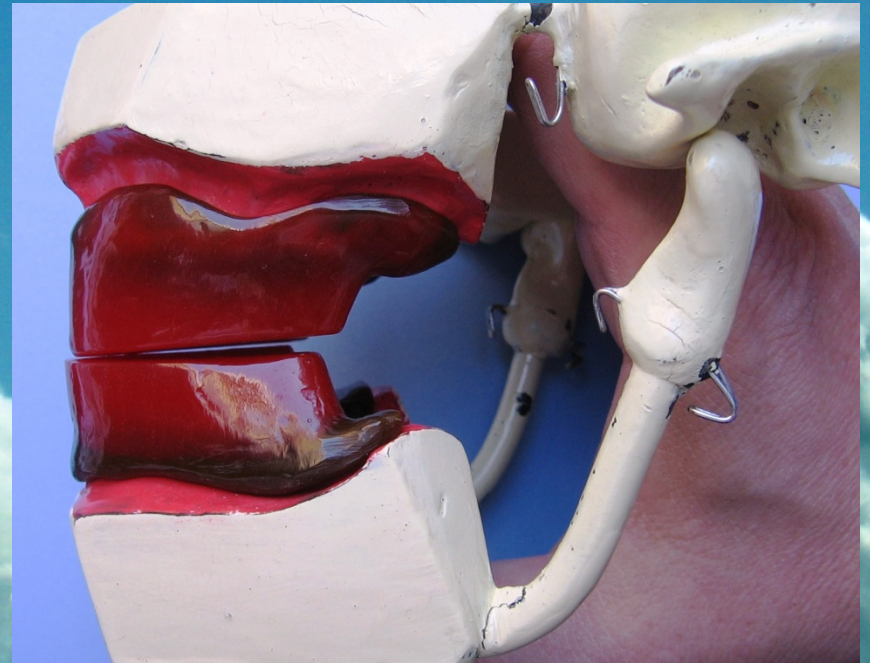

Transversalis Christensen jelenség



Transversalis Christensen jelenségnek nevezzük azt, ha a jól befaragott viaszsáncokkal a páciens lateropulsióba harap a viaszsáncok csak a munkaoldalon érintkeznek. A balansz oldalon a molárisok táján oldalfelé nyitott, ék alakú rés keletkezik az alsó és a felső viaszsáncok között. Ugyanezt tapasztalhatjuk ép fogazatban szemfog-frontfog vezetés esetén is. A jelenség oka az, hogy a condiláris sík és az occlusio sík szöget zár be.

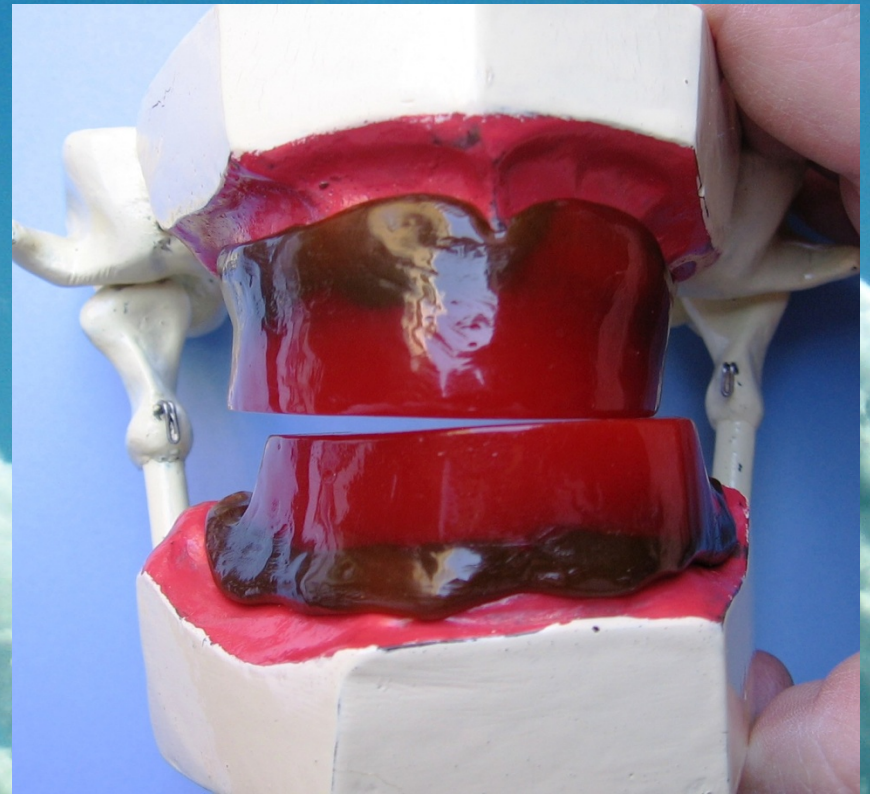



Prpopulsios pozícióban (rosszul) befaragott viaszsáncok




Prpopulsio

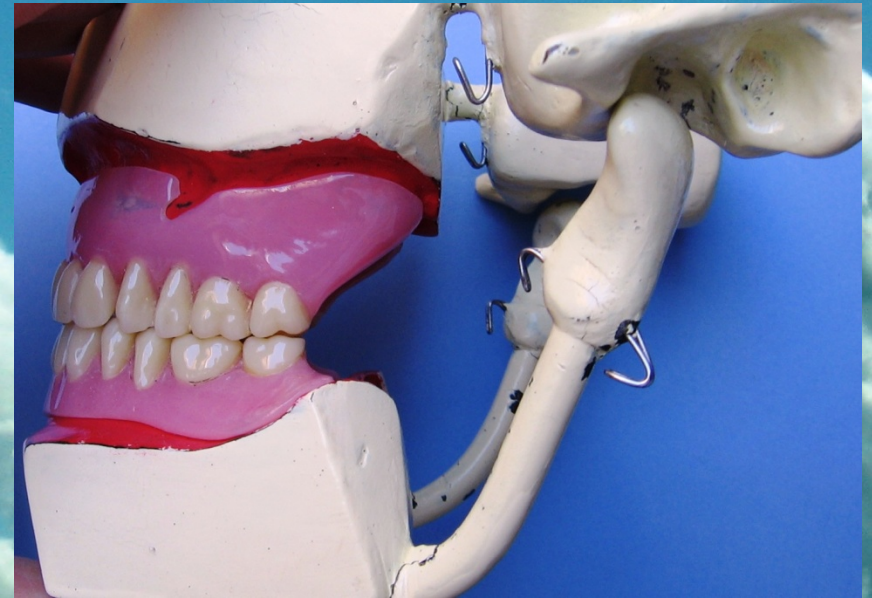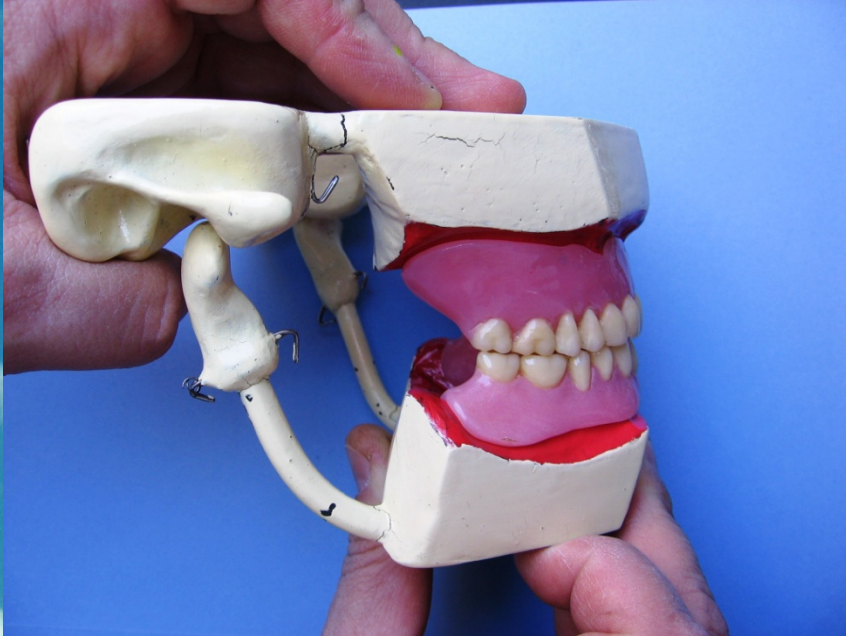


Inverz (fordított) sagittalis Christensen jelenség

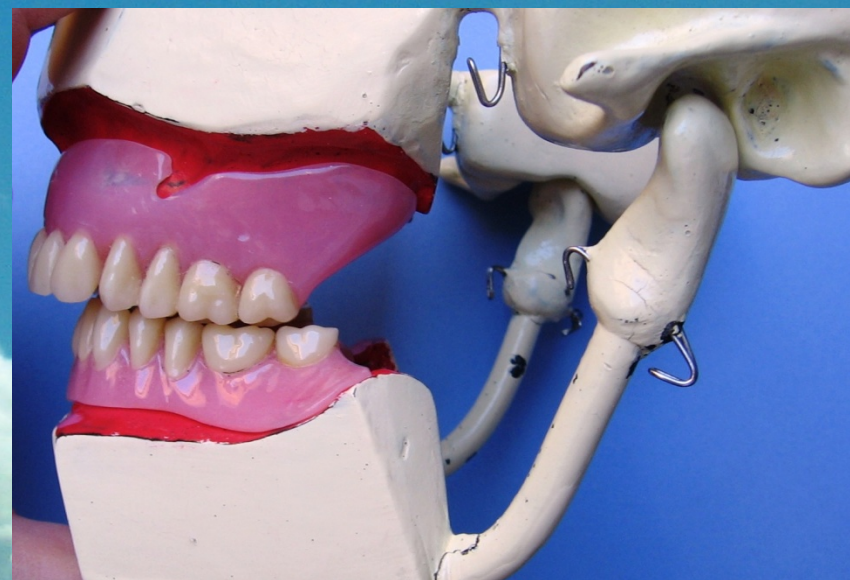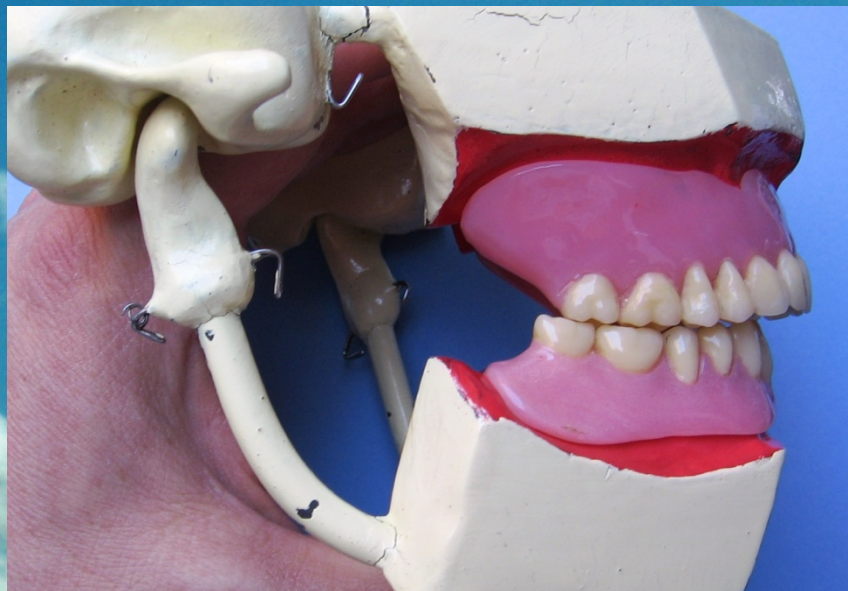

Lateropulsios pozícióban (rosszul) befaragott viaszsáncok

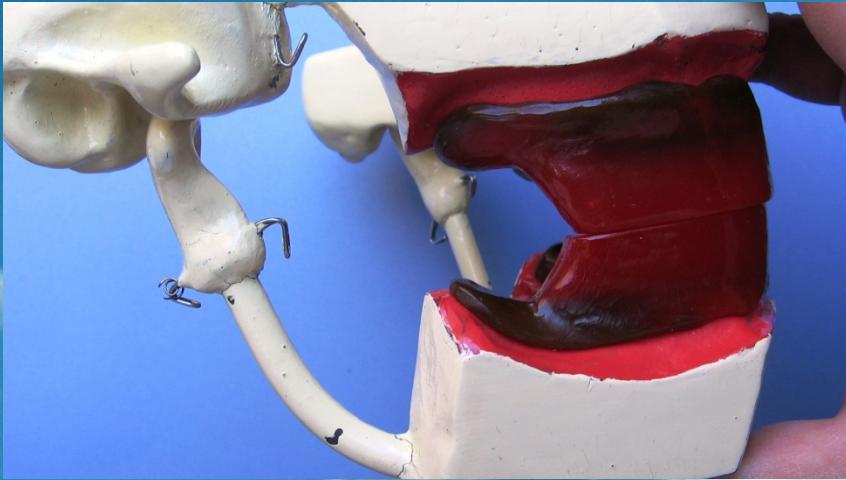

Lateropulsio

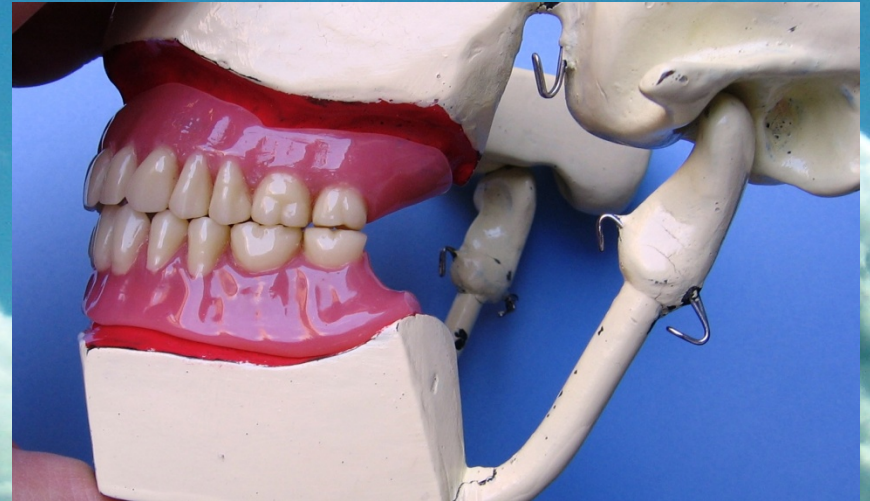

Inverz (fordított) transversalis Christensen jelenség

