


DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

**DR. LÁSZLÓ KÁDÁR
OBERARZT**

**DIE KLASSIFIKATION
DER LÜCKENGEBISSE
NACH
FÁBIÁN UND FEJÉRDY**

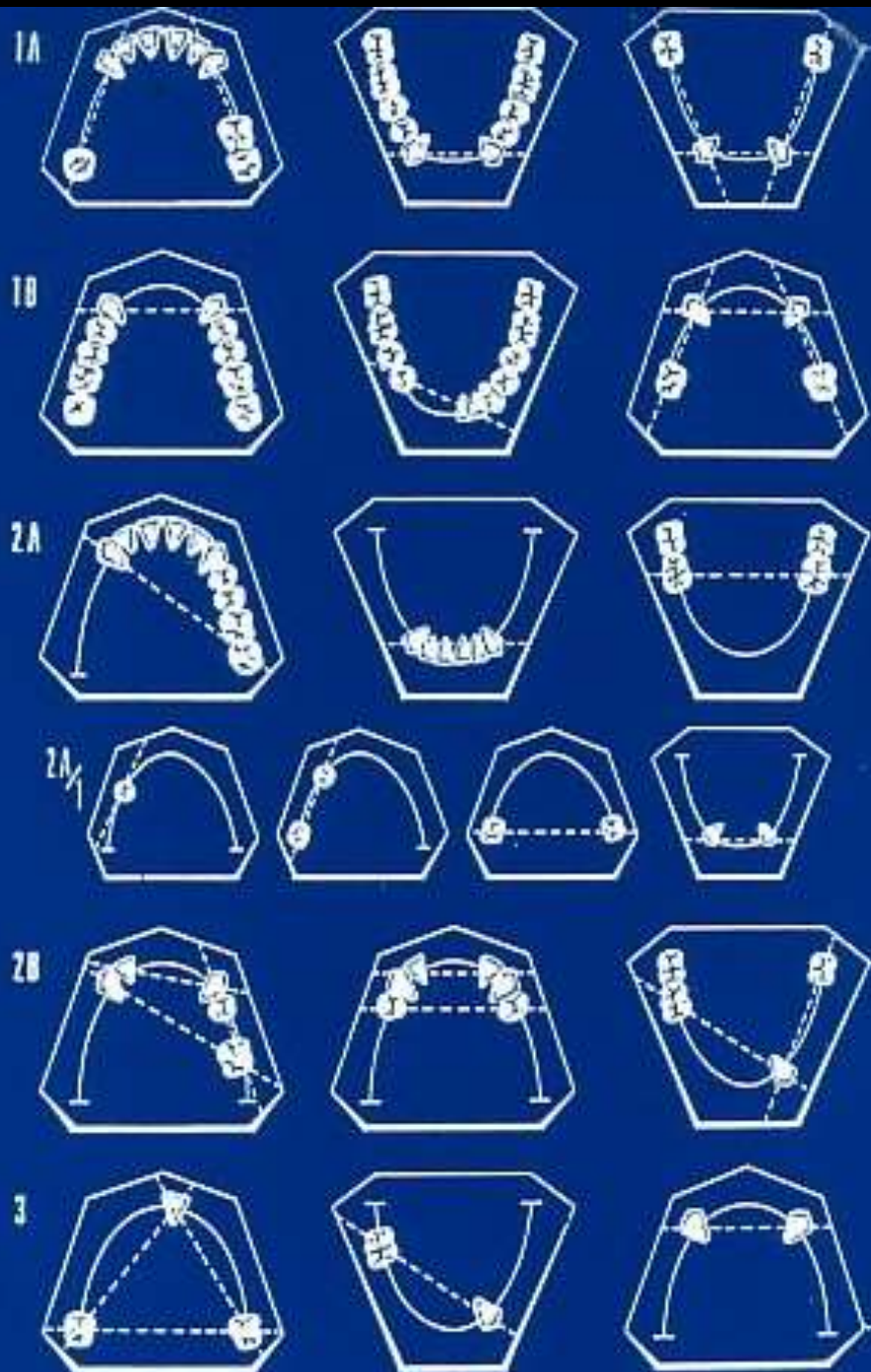

DIE KLASSIFIKATION DER LÜCKENGEBISSSE NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

28



DIE KLASSIFIKATION DER LÜCKENGEBISSSE NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

DIE WICHTIGSTE MERKMALE IN 2B KLASSE:

**MEHRERE DREHACHSEN SIND MÖGLICH
VON DENEN EINE - NACH DER ANFERTIGUNG DES ZAHNERSATZES –
ZUR EFFEKTIVEN DREHACHSE WERDEN KANN
(SICH UM DIESE ACHSE DREHEND, KANN SICH DER ERSATZ IN EINER RICHTUNG SENKEN)
DIE AUFTRATENDE ÜBERBELASTUNG, DIE DURCH DIE
ENTSTEHENDE DREHMOMENT VERURSACHT WIRD, AUF DEM
ANZUFERTIGENDEN ZAHNESATZ, KANN NICHT KOMPENSIERT
WERDEN**

DIE KLASSIFIKATION DER LÜCKENGEBISSE NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY KLASSE „2B“

DER AUSDEHNUNG NACH IN DIESE KLASSE GEHÖRT DIE ZAHNLÜCKE:

DIE GRÖSSTE ZAHNLÜCKE:

WENN DIE ZAHL DER RESTZAEHNE NUR DREI BETRAEGT,
UND DIE SICH NICHT NEBENEINANDER PLAZIEREN, SONDERN NICHT WEIT
VONEINANDER

DIE IN DIESE KLASSE GEHÖRENDEN ZAHNLÜCKEN UNTERSCHIEDEN SICH VON DER KLASSE 2A
INSOERN, DASS SICH DIE RESTZAEHNE NICHT IN EINEM BLOCK ANORDNEN, SONDERN ES
AUCH ZWISCHENLÜCKEN GIBT.



DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

DAS KENNZEICHNEN DIESER KLASSE:

DER ZAHNLOSE KIEFERKAMM (BZW. DIE AKTIVE OBERFLÄCHE DES ANZUFERTIGENDEN ZAHNERSATZES [KAUOBERFLÄCHE, ODER SCHNEIDEKANTE]) IN GROSSEM MASSE DIE VON RESTZÄHNEN BEGRENZTE HÜLLE SICH AUSBREITET

INFOLGE DIESER GROSSEN AUSBREITUNG KANN DIE SCHLAGENDE, AUF DIE PFEILERZÄHNE ÜBERTRAGENDE, UNGÜNSTIGE KRAFT SCHON NICHT MEHR KOMPENSIERT WERDEN

DARUM WIRD IN DIESER KLASSE EIN ABNEHMBARER ERSATZ ANGEFERTIGT

DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

DER ZAHNERSATZ IN DER KLASSE 2B WIRD IMMER DENTAL ABGESTÜTZT

**DIE ZWISCHENLÜCKEN DIE BEDINGUNGEN DER VERANKERUNG UND
ABSTÜTZUNG MODIFIZIEREN**

DIE MÖGLICHKEIT DER VERANKERUNG IST GÜNSTIG

KEIN KIPPMEIDER IST NÖTIG

**DIE BEDINGUNG DER PARODONTALEN ABSTÜTZUNG KANN GÜNSTIGER,
ABER AUCH UNGÜNSTIGER ALS IN DER KLASSE 2A SEIN**

DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

GRUNDLEGENDE VERSORUNGSGESTALTUNGSFORMEN:

**1. DIE ZWISCHENLÜCKE (-N) WERDEN MIT EINER BRÜCKE ERSETZT
+ ABNEHMBARE PARTIELLE PROTHESE**

**2. AN STELLE DER ZWISCHENLÜCKE ODER ZWISCHENLÜCKEN
WIRD EIN STEG VERWENDET UND DARAUF WIRD DIE
ABNEHMBARE PROTHESE ANGEFERTIGT**

**3. FESTSITZENDER ZAHNERSATZ WIRD NICHT ANGEFERTIGT
(AUSGENOMMEN KLAMERHALTEKRONE, LAUT INDIKATION)**

+ABNEHMBARE PARTIELLE PROTHESE

DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

VERSORGUNGSFORM 1.:

WENN DIE ZWISCHENLÜCKE ODER ZWISCHENLÜCKEN MIT EINER BRÜCKE ERSETZT WERDEN, WIRD DIE ZAHNLÜCKE DER KLASSE 2B IN EINER LÜCKE DER KLASSE 2A UMGEFORMT

DANACH STIMMEN DIE MÖGLICHKEITEN UND FORMEN DER VERSORGUNG MIT DEN , BEI DER KLASSE 2A BEKANNTMACHTEN MÖGLICHKEITEN

DIE ABNEHMBARE PROTHESE KANN ALSO MIT KLAMMER

(IN DIESEM FALLE IST NATÜRLICH EIN KIPPMEIDER NÖTIG)

ODER MIT GESCHIEBE VERANKERT WERDEN

DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

VERSORGUNGSFORM 2.:

**AN STELLE DER ZWISCHENLÜCKE ODER ZWISCHENLÜCKEN
VERWENDEN WIR EINEN STEG, MIT DESSEN HILFE DER
ABNEHMBARE TEIL DES ERSATZES VERANKERT WIRD.**

**DER STEG DIENGT GUT ZUM SCHIENEN DER RESTZÄHNE UND
AUCH ZUR DENTALEN ABSTÜTZUNG DES ABNEHMBAREN
TEILES.**

**DER QUERSCHNITT DES STEGES IST „U“-FÖRMIG,
LINIENMÄSSIG BERÜHRT DEN KIEFERKAMM,
UND DEREN RICHTUNG FOLGT,
DIE HÖHE DES STEGES MIN 2,5mm, DIE BREITE 1,5-2,5 mm.**

**GUT VERANKERT DEN ZÄHNERSATZ GEGEN LATERALE
BEWEGUNGEN**

**IM FALLE MEHRERER ZWISCHENLÜCKEN KANN MAN TEILS
EINER BRÜCKE, TEILS EIN STEG ANWENDEN.**

DIE VERSORGUNG DER PROTH. KLASSE „2B“ NACH FÁBIÁN UND FEJÉRDY

VERSORGUNGSFORM 3.:

**WENN DIE LÜCKE BEGRENZENDE ZÄHNE ZUM
KLAMMERTRAGEN GEEIGNET SIND, DANN KANN OHNE
ANFERTIGUNG EINER FESTSITZENDEN ZÄHNERSETZ, DER MIT
KLAMMER VERANKERTE HERAUSNEHMBARE PROTHESE
ANGEFERTIGT WERDEN**

(BEI AUSNAHMEFÄLLEN KLAMMERHALTEKRONEN WERDEN ANZUFERTIGEN)

**DIE KLAMMER SIND MIT DEN MODELLGUSSPROTHESE IN EINEM
EINHEIT GEGOSSEN**

KIPPMEIDER IST NICHT UNBEDINGT NÖTIG

PROTHESENBASIS KANN REDUZIEERT WERDEN

DIE GINGIVA MARGINALIS SORGFÄLTIG FREILASSEN



