


## MINTAVÉTELI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A HUS/TTP diagnosztikai vizsgálatok egymásra épülő vizsgálatok sorozatát jelentik, és a folyamat kezdetén nem becsülhető meg, hogy mely mintákra lesz szükség az összes mérés elvégzéséhez. Ez az oka annak, hogy javasolt az első alkalommal minden (**natív, citrátos, EDTA-s**) vérmintát vizsgálatra küldeni, megelőzendő, hogy a pontos diagnózis felállítása nem elérhető minta miatt késedelmet szenvedjen.

A **minta előkészítése és küldése** során az alábbi ábrán összefoglaltak szerint kell eljárni:

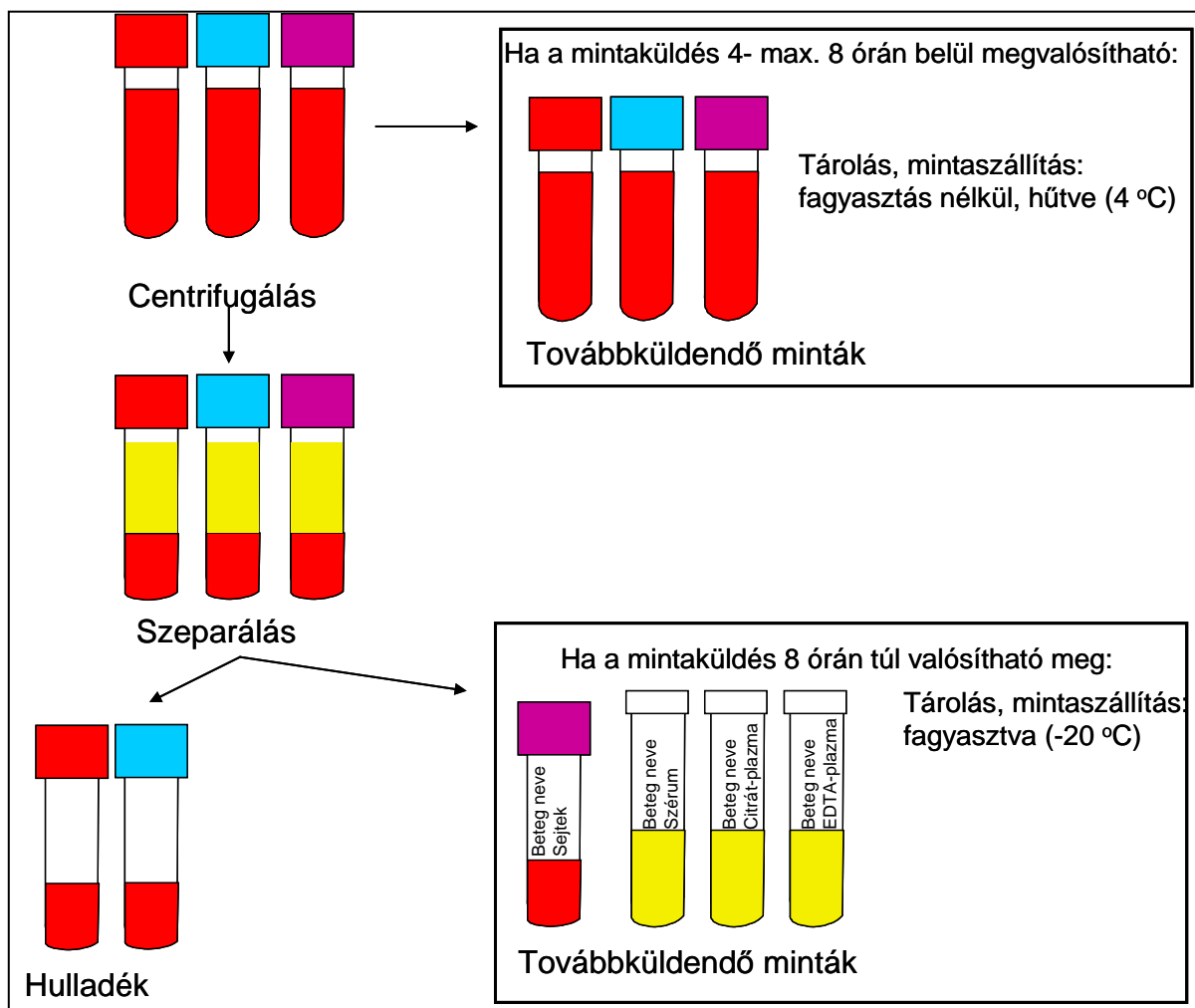

Kérjük a **mintatároló csövekre pontosan ráírni a beteg nevé**n és másodlagos **azonosítóin** (születés, TAJ) **túl a vérvétel idejét**, a **minta típusát** és jelezni, hogy **plazmaterápia** megkezdése előtti vagy azt követő mintáról van szó. Cél az, hogy a vérvétel az első plazmakezelés előtt történjen meg.

Amennyiben a vizsgálati minta korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre (koraszülöttek és csecsemők) a minimális vizsgálati mintatérfogat 200 mikroliter. Vizsgálatra alkalmas az a minta is, amely egyéb célokra lett levéve, és nem több mint 4 órát állt továbbküldés előtt.

A kivizsgált/ gondozott betegek követése során elegendő az aktuálisan mérendő paraméternek megfelelő mintát küldeni.